
Brugsanvisning

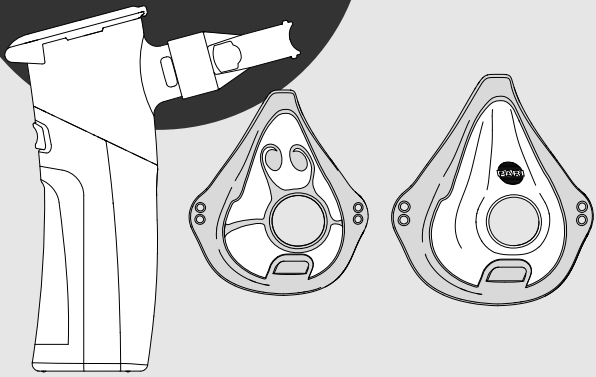

PARI BOY® Go

- Model: PARI BOY® Go (type 155)
- Model: PARI-maske soft (type 041)
- PARI inhalationssystem til terapi af de nedre luftveje

da

CE 0123

Læs brugsanvisningen

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt inden første anvendelse. Følg alle instruktioner og sikkerhedsanvisninger. Opbevar brugsanvisningen omhyggeligt.

Brugsanvisningen gælder for

PARI BOY® Go (type 155)
PARI maske soft (type 041)
PARI SMARTMASKs (type 041/078)

Kontakt

E-mail: info@pari.de
Tlf.: +49 (0)8151-279 220 (internationalt)
+49 (0)8151-279 279 (på tysk)

Copyright

©2026 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstr. 3, 82319 Starnberg, GERMANY. Forbehold for tekniske og optiske ændringer samt trykfejl. Afbildninger ligner.

Ansvarsfraskrivelse

Denne brugsanvisning beskriver PARI-produkters dele og det valgfrie tilbehør. Derfor beskrives og illustreres der i denne brugsanvisningen også detaljer, som ikke forekommer i dit PARI-produkt, fordi de f.eks. er landespecifikke og/eller er ekstraudstyr. Ved anvendelsen af systemerne, produkterne og funktionerne skal de til enhver tid gældende forskrifter i det pågældende land overholdes.

Varemærker

Registrerede varemærker tilhørende PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation i Tyskland og/eller andre lande:
BOY®, PARI®, PARI BOY Go®

Garanti

PARI giver en garanti på 3 år på controlleren. Garantiperioden starter på købsdatoen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

VIGTIG INFORMATION 5
Anbefalet anvendelse 5
Indikation 6
Kontraindikation 6
Mærkning 6
Sikkerhedsanvisninger og advarsler 8

PRODUKTBESKRIVELSE 9
Leverance 9
Oversigt og betegnelser 10
Funktionsdele 11
Funktionsbeskrivelse 12
Apparatets signaler 13
Materialeinformation 14
Levetid 14

ANVENDELSE 15
Forberedelse af terapien 16
Gennemførelse af terapien 19
Afbrydelse af terapien 23
Afslutning af terapien 24

RENGØRING, DESINFEKTION OG STERILISATION 24
Generelle hygiejneinformationer 24
Generelle informationer om materialebestandighed 25
Sikkerhedsanvisninger 25
Forberedelse 26
Hygiejnisk behandling 26

PARI PLEJEMODUS 30
Funktionsbeskrivelse 30
Gennemførelse 31

FEJLAFHJÆLPNING 32

TEKNISKE DATA 33
El-tilslutning 33
Krav til en netdel 33
Mål/vægt/påfyldningsvolumen 33
Aerosolkarakteristika iht. ISO 27427 34
Klassifikation iht. IEC 60601-1 / EN 60601-1 34
Elektromagnetisk kompatibilitet 35
Omgivelsesbetingelser 35

ANDET 36
Bortskaffelse 36
Links 36

1 VIGTIG INFORMATION

1.1 Anbefalet anvendelse

PARI BOY Go er et inhalationsapparat til terapi af de nedre luftveje.

Forstøveren er egnet til terapi af patienter i alle aldersgrupper startende med børn fra 2 år.

PARI BOY Go egner sig ikke til brug med antibiotika til terapi af bakterielle infektioner i luftvejene (f.eks. i tilfælde af *pseudomonas aeruginosa*).

PARI BOY Go må kun anvendes med stoffer, der er godkendt til forstøverterapi (forsøg ikke at indånde æteriske olier).

PARI BOY Go må kun bruges til den anbefalede anvendelse.

Dette produkt må kun benyttes af personer, som forstår brugsanvisningernes indhold, og som er i stand til at bruge produktet på sikker vis.

Følgende persongrupper skal under anvendelsen af sikkerhedsmæssige årsager være under opsyn af en ansvarlig person:

– Småbørn og børn

– Personer med begrænsede evner (f.eks. fysiske, psykiske, sensoriske)

Hvis patienten ikke selv er i stand til at betjene dette produkt på sikker vis, skal terapien gennemføres af den ansvarlige person.

Dette PARI-produkt er kun egnet til patienter, der kan trække vejret selv og er ved bevidsthed.

Dette PARI-produkt må bruges både i hjemmet og i professionelle sundhedsinstitutioner.

Inhalationsapparatet PARI BOY Go leveres usterilt. Genanvendeligheden er givet, såfremt der anvendes validerede rengørings- og desinfektionsprocesser.

Brug udelukkende originale reservedele og originalt tilbehør fra PARI.

Anvendelseshyppighed og -varighed fastsættes af medicinsk fagpersonale[1] i overensstemmelse med de individuelle behov.

Dette PARI-produkt må ikke anvendes i områder med forhøjet magnetisk eller elektrisk stråling (f.eks. i nærheden af en MR-scanner eller i umiddelbar nærhed af højfrekvent kirurgisk udstyr).

Masker

PARI-maske soft er tilbehør til inhalationsterapi. Den gør det muligt at inhalere aerosol[2] gennem munden og næsen.

PARI SMARTMASKs er tilbehør til forstøverterapi. De gør det muligt at inhalere aerosol[2] gennem mund og næse.

---

1) Medicinsk fagpersonale: Læger, apotekere og fysioterapeuter.

2) Aerosol: Små partikler, som svæver i gasser eller luft, og hvis sammensætning er fast, flydende eller blandet (fin "tåge").

De forskellige maskestørrelser egner sig til behandling af patienter i følgende aldersgrupper:
– PARI-børnemaske soft "Spiggy": Børn fra 4 år
– PARI-voksenmaske soft: Voksne
– PARI SMARTMASK Kids: Børn fra 2 år.
– PARI SMARTMASK: Til voksne.

Aldersangivelserne er omtrentlige værdier. Maskens faktiske størrelse afhænger af det individuelle ansigts størrelse og form.

PARI BOY Go må i liggende position kun bruges i kombination med PARI-maske soft eller en SMARTMASK.

1.2 Indikation

Sygdomme i de nedre luftveje.

Masker

Til patienter, der ikke kan inhalere med et mundstykke, eller hvis maskeinhalation foretrækkes.

Masken udgør et system sammen med et inhalationsapparat. Indikationen for dette system svarer til indikationen for det anvendte inhalationsapparat.

1.3 Kontraindikation

PARI GmbH kender ikke til kontraindikationer.

1.4 Mærkning

På produktet eller på emballagen står følgende symboler:

MD	Medicinsk udstyr
UDI	Unik udstyrsidentifikationskode
	Producent
	Produktionsdato
SN	Serienummer
REF	Artikelnummer
LOT	Batchnummer, charge
CE 0123	Dette produkt opfylder kravene i EU-forordning 2017/745 om medicinsk udstyr.
	Følg brugsanvisningen

IP22	Grad af beskyttelse iht. EN 60529. Beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med en diameter på mindst 12,5 mm og beskyttelse mod vanddråber ved en hældning på op til 15°.
	Luftfugtighed, begrænsning
	Lufttryk, begrænsning
	Anvendelsesdelens beskyttelsesgrad: Type BF
	Temperaturbegrænsning
	Jævnstrøm
	Vekselstrøm
	Det medicinske udstyr blev bragt i handlen efter den 13. august 2005. **Produktet må ikke bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald.** Den overstregede affaldsbeholder symboliserer, at der kræves affaldssortering.
	Mundstykke uden udåndingsventil
	PARI BOY Go forstøverhoved
	PARI BOY Go controller
	PARI-børnemaske soft "Spiggy"
	PARI voksenmaske soft
	PARI SMARTMASK Kids
	PARI SMARTMASK til voksne
	Elastik
	Vinkelstykke 45°
	Ampuller

1.5 Sikkerhedsanvisninger og advarsler

Den foreliggende brugsanvisning indeholder vigtige informationer, sikkerhedsanvisninger og sikkerhedsforanstaltninger. Kun hvis brugeren overholder disse, kan dette PARI produkt anvendes på en sikker måde.

Anvend kun dette PARI produkt som beskrevet i denne brugsanvisning.

Anvisningerne for brug af den anvendte inhalationsopløsning skal ligeledes overholdes.

Mærkning og klassificering af advarslerne

Sikkerhedsrelevante advarsler er i denne brugsanvisning inddelt i følgende risikotrin:

⚠ FARE

FARE betegner en farlig situation, der medfører alvorlige kvæstelser eller død, hvis den ikke undgås.

⚠ ADVARSEL

ADVARSEL betegner en farlig situation, der kan medføre alvorlige kvæstelser eller død, hvis den ikke undgås.

⚠ FORSIGTIG

FORSIGTIG betegner en farlig situation, der kan medføre lette eller middelsvære kvæstelser, hvis den ikke undgås.

HENVISNING

HENVISNING betegner en farlig situation, der kan medføre materielle skader, hvis den ikke undgås.

Generelt

Olie- og fedtholdige hudplejemidler kan beskadige de bløde kunststofkomponenter. Sådanne hudplejemidler bør undgås under anvendelsen.

Hvis der ikke viser sig en forbedring pga. terapien, eller der sågar opstår en forværring af din sundhedstilstand, skal du henvende dig hos det medicinske fagpersonale.

Terapi for børn og personer, der har brug for hjælp

For personer, der ikke er i stand til selv at gennemføre terapien eller ikke kan vurdere faremomenterne, er der en øget risiko for kvæstelse. Til sådanne personer hører f.eks. børn og personer med begrænsede evner. Disse personer skal under anvendelsen af sikkerhedsmæssige årsager være under opsyn eller hjælpes af en ansvarlig person.

Fare på grund af smådele, der kan sluges

ADVARSEL

Kvælningsfare på grund af blokerede luftveje
Produktet indeholder smådele. Smådele kan blokere luftvejene og medføre risiko for kvælning.
- Opbevar alle produktdele utilgængeligt for babyer og småbørn.

Brug kun apparatet til patienter fra 2 år og op

ADVARSEL

Sundhedsrisiko på grund af overdosering
Ved inhalationsterapi af spædbørn kan der opstå uønskede bivirkninger, herunder potentielt alvorlige bivirkninger.
- Brug kun apparatet til børn fra 2 år og op.

Rapportering af alvorlige hændelser

Rapporter om alvorlige hændelser til producenten og de ansvarlige myndigheder.

Ændringer på enheden


Hvis der foretages ændringer på enheden, kan en sikker og hensigtsmæssig drift af enheden ikke garanteres. Der kan opstå elektrisk stød eller overophedning. Foretag ingen ændringer på enheden.

2 PRODUKTBESKRIVELSE

2.1 Leverance

De medfølgende produktbestanddele er landespecifikke og kan afvige i omfang i forhold til de i denne brugsanvisning beskrevne bestanddele. Leveringsomfanget fremgår derfor af emballagen.


2.2 Oversigt og betegnelser

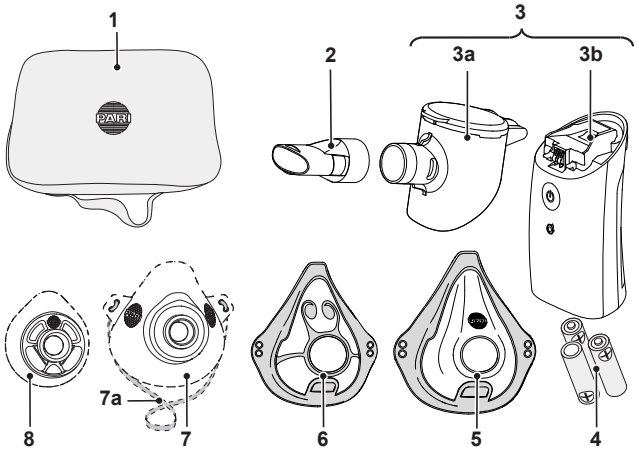

1	**Taske**	
2	**Mundstykke**	
3	**Inhalationsapparat**	
	3a	Forstøverhoved
	3b	Controller
4	**Batterier**	
5	**Voksenmaske soft**	
6	**Børnemaske soft "Spiggy"**	
7	**SMARTMASK** (følger ikke med leverancen)	
	7a	Elastik
8	**SMARTMASK Kids** (følger ikke med leverancen)	

2.3 Funktionsdele

Controlleren har følgende funktionsdele:

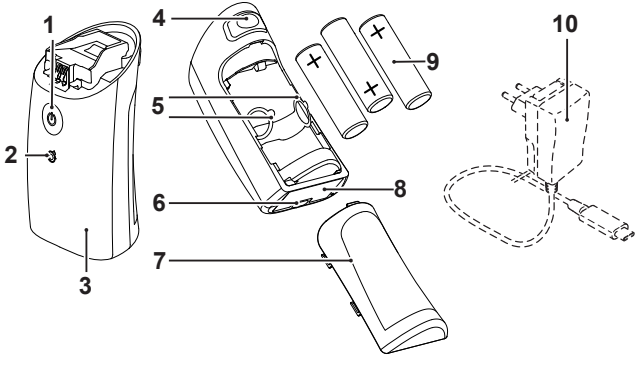


1	Tænd/sluk-knap
2	Plejemodus-LED
3	Controller
4	Udløserknap til forstøverhoved
5	Batteriflap
6	USB-C-bøsning til netdel
7	Låg til batterirum
8	Mærkeplade (husets bund)
9	Batterier
10	Netdel[3] (følger ikke med leverancen)

3) Netstiktypen er landespecifik. Afbildningen viser Eurostikket (type "C").

2.4 Funktionsbeskrivelse

PARI BOY Go består af en PARI-controller, et PARI-forstøverhoved, et PARI-mundstykke og PARI-tilbehør. Systemet bruges til terapi af de nedre luftveje.

PARI BOY Go er et støjsvagt, let, håndholdt, batteridrevet medicinsk udstyr, der omdanner din inhalationsopløsning til en aerosoltåge til inhalation. Medikamentet hældes i forstøverens forstøverhoved, som fører det til en membran med små huller. Når apparatet er tændt, vibrerer membranen og presser på den måde inhalationsopløsningen gennem de meget små huller, hvorved der opstår en forstøvertåge. Denne aerosol indåndes i lungerne via mundstykket eller evt. via en maske.

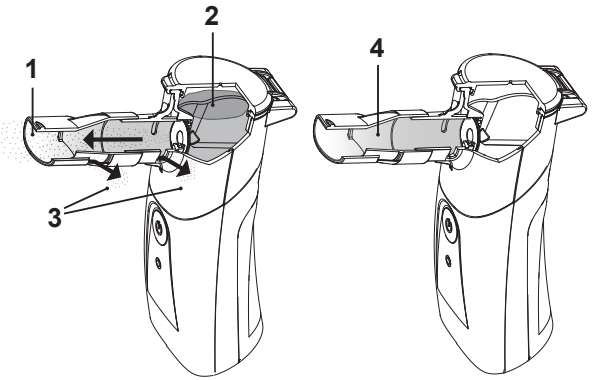

1	Når apparatet er tændt, trænger der aerosol ud af mundstykket.
2	Forstøverhoved med inhalationsopløsning.
3	Under inhalationen trænger der aerosol ud af udgangsåbningerne ved udånding.
4	I slutningen af inhalationen dannes der ikke længere aerosol.

2.5 Apparatets signaler

De forskellige driftstilstande vises ved hjælp af et lys på tænd/sluk-knappen, symbolet for plejemodus under knappen samt lydsignaler.

Visuelt signal		Akustisk signal	Driftstilstand
	Tænd/sluk-knap lyser grønt.	1 lydsignal	Apparatet tændes.
	Tænd/sluk-knappen blinker grønt 5 gange.	1 lydsignal	Terapien er afsluttet.
	Plejemodus-LED blinker blåt.	Lydsignalernes sekvens	Visning af påmindelse for plejemodus er aktiv.
	Plejemodus-LED pulserer blåt.	Intet lydsignal	Plejemodus er aktiv, returskylningen gennemføres og plejer membranens mikroporer.
	Plejemodus-LED slukker.	1 lydsignal	Plejemodus er gennemført.
	Tænd/sluk-knap lyser orange 5 sekunder.	2 lydsignaler	Der er ikke påfyldt medikament.
	Tænd/sluk-knap lyser orange 5 sekunder.	Intet lydsignal	Forstøverhovedet er ikke forbundet med controlleren. Forstøverhovedet afbrydes fra controlleren under terapien. Forstøverhovedet er defekt.
	Tænd/sluk-knap blinker orange.	Intet lydsignal	Batteriet har lav ladetilstand.
	Tænd/sluk-knappen blinker orange 5 gange.	2 lydsignaler	Batteri tomt/for lav spænding. Batteriet når en lav ladetilstand under terapien. Den maksimale driftstid pr. anvendelse på 20 minutter er nået. Terapien er blevet afsluttet/afbrudt før tiden.

2.6 Materialeinformation

De enkelte produktdele består af følgende materialer:

Produktdel	Materiale
Mundstykke	Polypropylen
Forstøverhoved	Polypropylen, termoplastisk elastomer, silikone, rustfrit stål
Controller-hus	Acrylnitril-butadien-styren, polycarbonat, polyoxymethylen, silikone
PARI-maske soft	Polypropylen, termoplastisk elastomer
PARI SMARTMASKs	Silikone
Udåndingsventil	Silikone
Vinkelstykke 45°	Polypropylen
Elastik	Syntetisk kautsjuk

2.7 Levetid

Produktdel	Maks. levetid	Hygiejnebehandlingsgrænser
Controller	3 år	156 desinfektionscyklusser
Forstøverhoved	1 år	52 desinfektionscyklusser, 365 inhalationscyklusser
PARI-maske soft	1 år	300 desinfektionscyklusser, 100 sterilisationscyklusser
PARI SMARTMASKs	1 år	300 desinfektionscyklusser, 100 sterilisationscyklusser

Produktets levetid afhænger af hygiejnebehandlings- og indåndingscyklusserne. Ved gentagen hygiejnebehandling eller anvendelse flere gange dagligt kan den blive forkortet. Produktkomponenterne er dimensioneret til de anførte antal cyklusser. De individuelle komponenter bør senest udskiftes, når de når den maksimale levetid eller de fastlagte hygiejnebehandlingsgrænser.

3 ANVENDELSE

Alle trin, der beskrives i det følgende, skal gennemføres korrekt.

Anvend kun rengjorte og tørrede produktbestanddele. Vask hænderne grundigt før hver anvendelse. Gennemfør også altid rengøringen og desinfektionen før første anvendelse.

ADVARSEL

Elektromagnetiske vekselvirkninger med diagnostisk udstyr

Elektriske apparater kan medføre elektromagnetiske forstyrrelser. Dette kan påvirke andre apparaters funktion samt terapien.

- Apparatet må kun anvendes på stationære hospitalsafdelinger og på intensivafdelinger.
- Brug ikke apparatet i områder, der er udsat for øget magnetisk eller elektrisk stråling, f.eks. i en MR-scanner.

ADVARSEL

Påvirkning af terapien på grund af elektromagnetiske forstyrrelser

Elektriske apparater kan medføre elektromagnetiske forstyrrelser. Dette kan påvirke apparaternes funktion samt terapien.

- Apparatet må ikke placeres lige ved siden af et andet apparat eller stables sammen med andre apparater.
- Hvis apparatet skal bruges umiddelbart ved siden af et andet apparat eller stables sammen med andre apparater, skal apparaternes korrekte funktion overvåges under drift.

ADVARSEL

Elektromagnetiske vekselvirkninger med styresystemer

Elektriske apparater kan generere elektromagnetiske felter. Dette kan påvirke andre apparaters funktion. Apparatet kan bruges i en bil, et tog eller et fly med følgende begrænsninger:

- Apparatet må kun bruges i passagerområder i tog og fly.
- Brug ikke apparatet i nærheden af styringssystemer i fly eller tog.
- Brug kun apparatet med batterier i bilen.

Tyverisikringssystemer og RFID-læsere (Radio Frequency Identification) kan påvirke forstøverens ydeevne. Brug ikke apparatet i nærheden af indgange i butikker, biblioteker og sygehuse.

Bærbare trådløse kommunikationsenheder (som mobiltelefoner eller routere) kan påvirke inhalationsapparatets funktion og dermed terapien. Hold en minimumsafstand på 30 cm mellem inhalationsapparatet og trådløse kommunikationsenheder.


3.1 Forberedelse af terapien

Samling af inhalationssystemet

FORSIGTIG

Fare for påvirkning af terapien
Beskadigede enkeltdele og en forkert montering kan forringe inhalationsapparatets funktion og dermed terapien.
- Kontrollér alle produktets bestanddele og tilbehøret forud for hver anvendelse.
- Udskift knækkede, deformerede, tilkalkede eller meget misfarvede dele.
- Overhold monteringsanvisningerne i denne brugsanvisning.

1. Forbind forstøverhovedet med controlleren. Skub forstøverhovedet vandret langs føringen på controlleren, indtil du hører et klik ("CLICK").

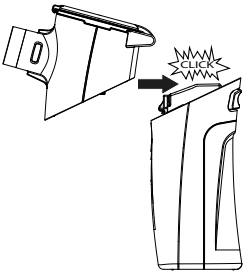


Isæt eller udskift batterier

HENVISNING
Defekt apparat på grund af lækkende batterier
Lækkende batterier fører til korrosion og beskadiger apparatet.
- Fjern batterierne, hvis det forventes, at apparatet ikke skal bruges i længere tid.

Der er ingen batterier i batterirummet før den første anvendelse.

1. Åbn dækslet på controllerens batterirum.
2. Træk i batteriflapperne for at fjerne evt. opbrugte batterier.
3. Sæt tre nye AA-batterier i. Tryk batterierne helt ind på den dertil beregnede plads. Vær opmærksom på polsymbolerne i controllerens batterirum og på batterierne.
4. Luk dækslet på batterirummet. Batterirummets dæksel er sikkert låst, når der høres en kliklyd ("CLICK").

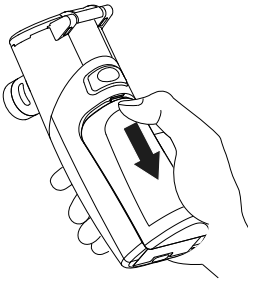

Brug med netdel

Apparatet kan bruges med enten batterier eller netdel. Batterierne kan ikke oplades med netdelen!

ADVARSEL

Fare for kvæstelse ved strangulering
For personer, der ikke er i stand til selv at gennemføre terapien eller ikke kan vurdere faremomenterne, er der en øget risiko for kvæstelse ved strangulering med tilslutningskablet. Til sådanne personer hører f.eks. babyer, børn og personer med begrænsede evner.
- Det skal sikres, at anvendelsen ved sådanne personer overvåges eller gennemføres af en person med ansvaret for sikkerheden.

ADVARSEL

Elektriske apparater, der er sluttet til strømnettet, udgør en potentiel fare
Der er fare for elektrisk stød.
- Hold netdelen væk fra væske og fugtige omgivelser.
- Brug ikke et defekt apparat/en defekt netdel (f.eks. ødelagt hus).
- Afbryd USB-C-stikket fra controlleren, inden du skiller apparatet ad eller påbegynder apparatets hygiejniske behandling.
- Brug ikke en stikadapter.
- Til netdrift anbefaler vi, at du bruger PARI-netdelen (078B7116). Alternativt kan der også anvendes netdele fra tredjepartsleverandører, forudsat at disse opfylder de tekniske krav [se: Krav til en netdel, side 33].

ADVARSEL

Påvirkning af terapien på grund af elektromagnetiske forstyrrelser
Elektriske apparater kan medføre elektromagnetiske forstyrrelser. Dette kan påvirke apparaternes funktion samt terapien.
- Der må kun bruges kabler med en længde på op til 3 m.

HENVISNING
Ladekabler skal altid holdes på afstand af kæledyr, f.eks. kaniner. Kabler, der er bidt i, kan medføre funktionsfejl eller beskadigelse af udstyret.

1. Forbind USB-C-tilslutningen med controlleren.
2. Sæt netdelen i en egnet stikkontakt.


Forberedelse af inhalationsterapi

PÅFYLDNING AF FORSTØVERHOVEDET

FORSIGTIG

Påvirkning af terapien på grund af overdosering
Hvis forstøveren indeholder for meget væske, påvirkes forstøvningen og dermed terapien.
- Påfyld den nødvendige mængde inhalationsopløsning i forstøveren fra oven. Vær opmærksom på den maks. påfyldningsvolumen. Den nødvendige mængde inhalationsopløsning fremgår af brugsinformationen til medikamentet.

1. Åbn forstøverhovedet, idet du klapper forstøverens dæksel opad.
2. Påfyld den nødvendige mængde inhalationsopløsning i forstøverhovedet fra oven.
   Vær opmærksom på den maks. påfyldningsvolumen [se: Mål/vægt/påfyldningsvolumen, side 33].
3. Luk forstøverdækslet. Kontrollér, at forstøverens dæksel er gået i hak.
4. Hvis du vil inhalere med mundstykke [se: Inhalation med mundstykket, side 20]. Hvis du vil inhalere med maske [se: Inhalation med maske, side 20]

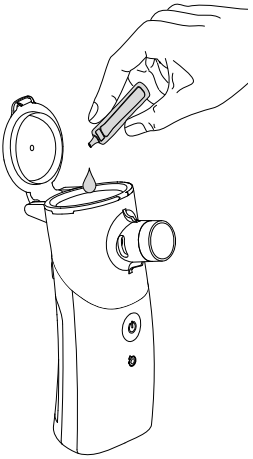


3.2 Gennemførelse af terapien

Inden der gennemføres en terapi, skal alle sikkerhedsanvisninger og advarsler i denne brugsanvisning være læst og forstået.

1. Slå controlleren til, idet du trykker kort på tænd/sluk-knappen. Der lyder et kort lydsignal, og knappens LED lyser grønt.
2. Kontrollér, at der dannes aerosol, inden terapien påbegyndes (der skal strømme en fin tåge ud af forstøveren).

Inhalation med mundstykket

1. Sæt mundstykket på forstøverhovedet.
2. Sæt dig afslappet og i opret position.
3. Tag mundstykket mellem tænderne, og omslut det med læberne.
4. Træk vejret så langsomt og dybt ind som muligt gennem mundstykket, og ud igen på en afslappet måde.
5. Udfør inhalationen, indtil der høres et lydsignal. LED'en blinker grønt 5 gange.

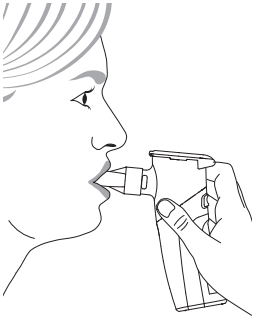

Hold inhalationsapparatet så lodret som muligt under terapien, så det påfyldte medikament altid er i kontakt med membranen. På den måde sikrer du, at apparatet ikke slukkes for tidligt, og at doseringen ikke bliver forkert.

- *I slutningen af terapien skal du kontrollere, at medikamentbeholderen er tom.*
- *Hvis der ophobes for meget kondensvand eller spyt på ydersiden af membranen, kan forstøvningen stoppe.*
- *Sluk for apparatet, og fjern fugten ved at ryste det ud eller tørre det af med en fnugfri klud. Tænd derefter for apparatet igen, og fortsæt terapien.*

Inhalation med maske

Masken bruges i stedet for et mundstykke.

1. Træk evt. mundstykket af forstøverhovedet.
2. Sæt masken på forstøverhovedet.

FORSIGTIG

Påvirkning af terapien som følge af aerosol, der trænger ud

Hvis masken ikke sidder tæt mod ansigtet, kan aerosolen slippe ud. Det kan medføre underdosering af medikamentet.

- Sørg for, at masken omslutter begge mundvige og næsen fuldstændigt.


Vær opmærksom på eventuelle bivirkninger som følge af udstrømmende aerosol. Disse er beskrevet i brugsvejledningen til det pågældende medikament.


MED PARI-BØRNE- ELLER -VOKSENMASKE SOFT

1. Kontrollér, om udåndingsventilen er trykket udad, så der kan åndes ud uhindret under inhalationen.
2. Sæt dig afslappet og i opret position.
3. Sæt masken med et let tryk tæt hen over mund og næse.

For at forstøve inhalationsopløsningen fuldstændigt skal du sørge for, at inhalationsapparatet ikke vippes mere end 50° fra den lodrette position (se illustrationen). Ret evt. apparatet op igen.

4. Ånd så langsomt og dybt som muligt ind gennem masken, og ånd afslappet ud igen.
5. Udfør inhalationen, indtil der høres et lydsignal. LED'en blinker grønt 5 gange.

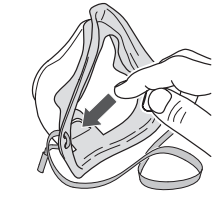

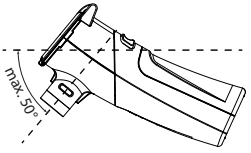

Hvis børnemasken "Spiggy" er for stor, kan babymaske soft til børn fra 2 år bruges med PARI BOY Go.

MED PARI SMARTMASKS

FORSIGTIG

Fare på grund af tilstoppet udåndingsåbning
Hvis udåndingsåbningen stoppes til på grund af udåndingsventilen, er der fare for alvorlige kvæstelser.


- Sørg for, at udåndingsåbningerne altid er åbne.
- Sørg for, at udåndingsventilen ligger fladt. Den må ikke komme i klemme i maskens udåndingsslids.

Fastgør den blå udåndingsventil på PARI SMARTMASK til voksne:

1. Skub udåndingsventilen forsigtigt på masken.
2. Tryk udåndingsventilen over vulsten, indtil den befinder sig helt i kærven.




3. Fastgør om nødvendigt elastikken på masken.

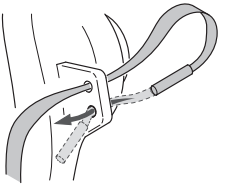


4. Sæt dig afslappet og i opret position.
5. Sæt masken tæt over mund og næse med et let tryk. Sørg for, at forstøveren er i lodret position.

For at forstøve inhalationsopløsningen fuldstændigt skal du sørge for, at inhalationsapparatet ikke vippes mere end 50° fra den lodrette position (se illustrationen). Ret evt. apparatet op igen.

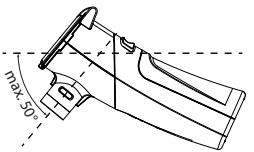

6. Fastgør masken på ansigtet, evt. ved hjælp af elastikken. Elastikken sidder omkring baghovedet.
7. Ånd så langsomt og dybt som muligt ind gennem masken, og ånd afslappet ud igen.
8. Udfør inhalationen, indtil der høres et lydsignal. LED'en blinker grønt 5 gange.

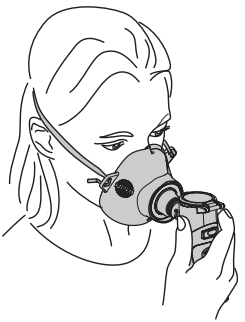

INHALATION MED MASKE – EVT. LIGGENDE

1. Juster inhalationsapparatet og maskepositionen, så de passer til barnets position.
2. Sæt masken med et let tryk tæt hen over mund og næse.
3. Barnet skal ånde så langsomt og dybt som muligt ind gennem masken og ånde afslappet ud igen.
4. For at forstøve den påfyldte inhalationsopløsning fuldstændigt skal du af og til sætte inhalationsapparatet i lodret position.
5. Udfør inhalationen, indtil der høres et lydsignal. LED'en blinker grønt 5 gange.



***Tip til lettere anvendelse**: Børn kan stritte imod, når masken trykkes på, f.eks. ved at dreje hovedet frem og tilbage. Støt baghovedet med en hånd for at opnå en effektiv inhalation. Derved er det lettere at følge hovedbevægelserne med masken.*

PARI BOY Go skal anvendes i liggende position med en SMARTMASK uden vinkelstykke 45°.

3.3 Afbrydelse af terapien

Gør som følger for at afbryde terapien:

Ved brug med batterier	Ved brug med netdel
1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen. 2. Stil apparatet stående.	3. Tryk kort på tænd/sluk-knappen. 4. Afbryd evt. USB-C-tilslutningen fra controlleren. 5. Stil apparatet stående.

Gør som følger for at genoptage terapien:

Ved brug med batterier	Ved brug med netdel
1. Tryk kort på tænd/sluk-knappen. 2. Udfør inhalationen som normalt.	3. Forbind USB-C-tilslutningen med controlleren. 4. Tryk kort på tænd/sluk-knappen. 5. Udfør inhalationen som normalt.

3.4 Afslutning af terapien

1. Udfør inhalationen, indtil der høres et lydsignal. LED'en blinker grønt 5 gange.
   ⇨ Terapien er afsluttet, når der ikke genereres mere aerosol.
   ⇨ Apparatet slukkes automatisk, når terapien er afsluttet.
2. Afbryd evt. USB-C-tilslutningen fra controlleren.
3. Træk netdelen ud af stikkontakten.

Hvis plejemodus-LED'en lyser blåt, og der lyder en række lydsignaler, skal du udføre plejemodus [se: Gennemførelse, side 31].

4 RENGØRING, DESINFEKTION OG STERILISATION

I de følgende afsnit beskrives den hygiejniske behandling før første brug og efter alle anvendelser af produktet PARI BOY Go og dets tilbehør. Dette omfatter forskylning, manuel og maskinel hygiejnisk behandling og sterilisation.

PARI BOY Go er velegnet til et patientskift eller til at låne ud. Udfør følgende trin før et patientskift/udlån:

– Kontroller controllerens funktion.
– Controller og taske: rengør og desinficer
– Forstøverhoved og mundstykke: udskift
– Maske: rengør, desinficer og steriliser. Udskift masken, hvis en sterilisation ikke er mulig
– Udskift gummibåndet

4.1 Generelle hygiejneinformationer

– Vask hænderne grundigt før hver hygiejnisk behandling.
– Hjælpemidler til den hygiejniske behandling skal være rene.
– Produktet **skal desinficeres efter hver anvendelse og én gang om ugen**. **Højrisikopatienter skal desinficere én gang om dagen.**
– For at sikre at apparatet og dets tilbehør forbliver rene under brug, skal man sørge for, at der udelukkende anvendes rengørings- og desinfektionsmetoder, der er specifikt valideret til det pågældende produkt. De definerede parametre skal overholdes pålideligt.
– Brugsanvisningen til det anvendte kemikalie skal overholdes.
– Kontrollér alle produktets dele efter hver rengøring, desinfektion eller hvis relevant sterilisation.
– Udskift knækkede, deformerede, tilkalkede eller meget misfarvede dele.

4.2 Generelle informationer om materialebestandighed

– Forstøverhoved, mundstykke og controller kan ikke steriliseres.
– Brug kun rengørings- og desinfektionsmidler, der er godkendt til rengøring af medicinsk udstyr og tilbehør.
– For at undgå skader på produktet skal du følge producentens anvisninger og forarbejde produkterne i henhold til følgende vejledning.
– Brug ikke rengørings- og desinfektionsmidler, der efterlader en hinde, da der ellers kan dannes proteinholdige rester.
– Brug ikke en børste eller lignende, når du rengør forstøverhovedet, da dette kan beskadige membranen.

4.3 Sikkerhedsanvisninger

⚠ ADVARSEL

Infektionsfare
Der er ved genanvendelse af produkter forøget risiko for mikrobeoverførsel og infektioner, i særdeleshed som følge af krydskontaminering, mikrobevækst, restmikrober og restesterende fugt.
- Gennemfør også ubetinget rengøring og desinfektion før første anvendelse.
- Rengør, desinficer og (om nødvendigt) steriliser samtlige produkter i overensstemmelse med hygiejnebehandlingsvejledningen og de anførte hygiejnebehandlingscyklusser for at forhindre restmikrober og krydskontaminering.
- Sørg ubetinget for fuldstændig tørring, inden der udføres sterilisation, og efter hygiejnebehandlingen, så mikrobevækst som følge af resterende fugt forhindres.
- Brug altid rene hygiejnebehandlingshjælpemidler, og sørg for konsekvent rengøring af produktet. Tilbageværende urenheder påvirker den videre hygiejnebehandling.

⚠ ADVARSEL

Infektionsfare ved risikopatienter
For risikopatienter udgør luftvejsinfektioner en øget risiko for forværring af den generelle helbredstilstand, da de er særligt udsatte på grund af resterende bakterier. Risikopatienter er f.eks. patienter med cystisk fibrose, patienter med immunsuppression eller immundefekt samt sårbare patientgrupper.
- Hvis du er risikopatient, skal du rengøre og desinficere de enkelte dele én gang dagligt under terapien.
- Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er risikopatient, bør du rådføre dig med medicinsk fagpersonale, inden du bruger produktet.




HENVISNING

Fare for apparatdefekt på grund af indtrængende væsker

Hvis der trænger væsker ind i controlleren, kan det medføre en apparatdefekt.

- Nedsænk ikke controlleren i vand.
- Rengør controlleren under rindende vand.
- Sprøjt ikke væske på controlleren eller netledningen.
- Hvis der er trængt væske ind i controlleren, må controlleren under ingen omstændigheder anvendes. Før controlleren tages i drift igen, skal du kontakte producenten eller forhandleren.

4.4 Forberedelse

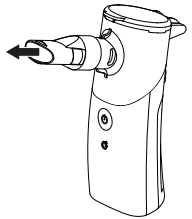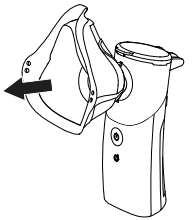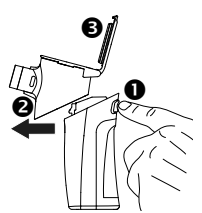
Mundstykke, maske, forstøverhoved			
Afmontering:			
	1. Sluk apparatet. 2. Afbryd evt. USB-C-tilslutningen fra controlleren. 3. Træk mundstykket eller masken af forstøverhovedet. 4. Træk forstøverhovedet af controlleren. Tryk på udløserknappen (1) og træk forstøverhovedet (2) vandret fremad. Åbn dækslet på forstøverhovedet (3). 5. Fjern elastikken fra masken, hvis den er sat på.		

4.5 Hygiejnisk behandling


Rengøring

Controller og taske
1. Aftør husets udvendige overflade samt tasken med en ren, fugtig klud.

Forskylning

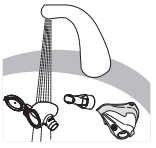Forstøverhoved inkl. mundstykke/maske		
Afskylning:	Undgå kemiske rester og tørring af organisk materiale på apparatet umiddelbart efter brug! 1. Skyl alle dele (undtagen controlleren, netdelen, batterierne og tasken) lige efter brug under rindende vand fra hanen (vandtemperatur ≤ 40 °C) for at fjerne synligt snavs.	

Rengøring

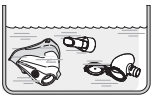Forstøverhoved inkl. mundstykke/maske		
Iblødlægning:	1. Derefter lægges produktkomponenterne i blød i 5 minutter i vand med en temperatur på ca. 38 °C tilsat et klart opvaskemiddel (1 tsk. opvaskemiddel til 3 l vand). 2. Sørg for, at alle dele er dækket med vand. 3. Undgå luftbobler, når apparatet lægges ned i vandet. 4. Bevæg lejlighedsvist delene frem og tilbage. 5. Fjern produktets dele, og skyl dem under rindende vand fra hanen (mindst drikkevandskvalitet og vandtemperatur ≤ 40 °C) for at fjerne sæberester.	

Elastik	
Rengøring:	1. Rengør om nødvendigt elastikken med varmt drikkevand og lidt opvaskemiddel. *Elastikken kan hverken desinficeres eller steriliseres.*

Alternativ metode til professionelle sundhedsinstitutioner

Forstøverhoved inkl. mundstykke/maske	
Automatisk rengøring:	1. Derefter hældes produktets dele i et rengørings- og desinfektionsapparat, der opfylder kravene i EN ISO 15883. 2. Brug et egnet rullebord og en instrumentholder, og placer alle produktkomponenterne, så de rengøres grundigt overalt. 3. Start programmet: Forrengøring med koldt vand fra hanen i 2 minutter. Vask ved 55 °C og enzymatisk-alkalisk rengøringsmiddel i 5 minutter. Mellemskylning med koldt, demineraliseret vand i 3 minutter.

Desinfektion

Alle dele (undtagen netdel og batterier) skal desinficeres én gang om ugen – højrisikopatienter skal desinficere én gang om dagen. Produktets dele skal rengøres på forhånd for at sikre en tilstrækkelig desinfektion.

Controller og taske	
Aftørringsdesinfektion:	Anvend til desinfektionen et gængs desinfektionsmiddel på alkoholbasis. 1. Fugt en blød, fnugfri klud med desinfektionsmiddel. 2. Aftør husets udvendige overflade samt tasken omhyggeligt ved hjælp af kluden. 3. Sørg for, at produktet holdes fugtigt i hele den nødvendige indvirkningstid for desinfektionsmidlet. Tør det eventuelt af igen. 4. Lad produkterne tørre helt, når desinfektionsmidlet har virket.

Forstøverhoved, mundstykke og maske		
Termisk Desinfektion:	1. Læg samtlige enkeltdele i spilkogende, destilleret vand i min. 5 minutter. 2. Sørg for, at alle dele er dækket med vand, og at der er nok vand i gryden. Undgå luftbobler, når apparatet lægges ned i vandet. 3. Bevæg lejlighedsvist delene frem og tilbage.	

ALTERNATIV METODE TIL PROFESSIONELLE SUNDHEDSINSTITUTIONER

Forstøverhoved, mundstykke og maske	
Rengørings- og desinfektionsapparat:	1. En A0-værdi > 3000 skal nås. En temperatur på 90 °C i min. 5 minutter anbefales. Brug kontamineringsfrit vand (<10 cfu/ml). *Automatisk desinfektion er som regel en del af et rengørings- og desinfektionsapparatprogram, som også omfatter automatisk rengøring, f.eks.:* *– Forskylning med koldt postevand i 2 minutter.* *– Vask ved 55 °C med 0,5 % alkalisk-enzymatisk rengøringsmiddel i 5 minutter.* *– Mellemskylning med koldt, demineraliseret vand i 3 minutter.* *– Termisk desinfektion ved 90 °C i kontamineringsfrit vand (<10 cfu/ml) i 5 minutter (A0>3000).*

Tørring

Sørg for, at der ikke er resterende fugt til stede i komponenterne efter rengøringen eller desinfektionen. Tør apparatet på følgende måde.

Apparat

1. Ryst vandet ud af alle enkeltdele.
2. Læg samtlige enkeltdele på et tørt, rent og sugende underlag, og lad dem tørre fuldstændigt.
3. Kontaktpins skal være tørre.




Sterilisation

Produktet skal rengøres og desinficeres på forhånd for at sikre en tilstrækkelig sterilisation.

Forstøverhoved, mundstykke og controller kan ikke steriliseres.

Maske

Information vedr. sterilisation af PARI-maske soft:
Anvend til sterilisation af denne masketype altid den tilsvarende maskestabilisator,[4], da de høje temperaturer kan få maskens passform til at ændre sig.

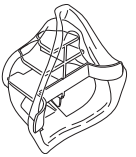

1. Sæt maskestabilisatoren ind i masken som vist i afbildningen.
2. Pak alle enkeltdele i et sterilbarrieresystem iht. ISO 11607-1 (f.eks. folie-papir-emballage).
3. Steriliser produktet med en dampautoklave iht. ISO 17665 med følgende parametre: Fraktioneret for-vakuum 134 °C i mindst 3, højst 5 minutter.

Information vedr. sterilisation af en PARI SMARTMASK:
Gennemfør sterilisationen af denne masketype uden maskestabilisator.

1. Pak alle enkeltdele i et sterilbarrieresystem iht. ISO 11607-1 (f.eks. folie-papir-emballage).
2. Steriliser produktet med en dampautoklave iht. ISO 17665 med følgende parametre: Fraktioneret for-vakuum 134 °C i mindst 3, højst 5 minutter.

4) Maskestabilisatoren følger ikke med leverancen.

Opbevaring

Opbevar dette produkt som beskrevet nedenfor:

Produkt
– tørt og støvfrit (f.eks. i den medfølgende taske) – hvis relevant beskyttet mod kontaminering (f.eks. med valgfri sterilindpakning)

Yderligere validerede metoder til hygiejnisk behandling

De anførte anvisninger er af PARI valideret som egnede i forbindelse med klargøring af dit medicinske udstyr til genanvendelse af dette.

Yderligere validerede metoder til hygiejnisk behandling:
https://www.pari.com/fileadmin/041D0624_Professional_healthcare_institution_Validated_Reprocessing_Methods.pdf

Sørg for, at den hygiejniske behandling, der rent faktisk udføres med dit udstyr, de anvendte kemikalier og dit personale, giver de ønskede resultater. Dette kræver normalt validering og rutinemæssig overvågning af processen. Vær især opmærksom på, at den valgte hygiejniske behandling er tilstrækkeligt effektiv, og at eventuelle negative konsekvenser vurderes, hvis du er nødt til at afvige fra vores validerede procedurer.

5 PARI PLEJEMODUS





5.1 Funktionsbeskrivelse

PARI-plejemodus vedligeholder aerosolapparatet ved at fjerne eventuelle rester af inhalationsopløsningen fra membranen. For at sikre, at inhalationstiderne er korte og forstøvningseffekten høj, skal du udføre plejemodus efter ti terapicyklusser. Den blå plejemodus-LED og en sekvens af lydsignaler minder dig om gennemførelsen.



PARI plejemodus erstatter ikke rengøring og desinfektion!

5.2 Gennemførelse

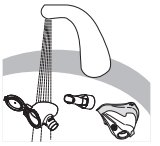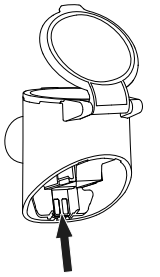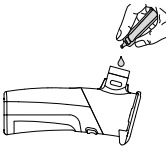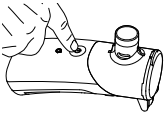Sekvens		
Trin 1: Afskylning	1. Åbn forstøverdækslet. 2. Skyl forstøverhovedet af med varmt drikkevand.	
Trin 2: Tørring	***HENVISNING*** **Fare for en apparatdefekt på grund af væske på kontaktfladen** Hvis der trænger væsker ind i controlleren, kan det medføre en apparatdefekt. • Sørg for, at kontaktfladerne er tørre. 1. Kontroller, om kontaktfladen (se pil) er tør. 2. Ryst evt. væsken ud af forstøverhovedet. 3. Tør eventuelt kontaktfladen forsigtigt af med en fnugfri klud.	
Trin 3: Påfyldning	1. Forbind forstøverhovedet med controlleren. Skub forstøverhovedet vandret langs føringen på controlleren, indtil du hører et klik ("CLICK"). 2. Luk evt. forstøverdækslet. 3. Læg inhalationsapparatet vandret. 4. Hæld 15–20 dråber af en 0,9 % saltopløsning eller destilleret vand gennem åbningen i forstøverhovedet.	
Trin 4: Pleje	1. For at starte plejemodus skal du trykke på tænd/sluk-knappen, indtil der lyder 2 lydsignaler. ⇨ Plejemodus-LED pulserer blåt (varighed ca. 5 minutter). ⇨ Plejemodus er afsluttet, når den blå plejemodus-LED slukkes, der lyder 1 lydsignal, og tænd/sluk-knappen blinker grønt 5 gange. *Ved slutningen af plejemodus trænger der aerosol ud af åbningen på forstøverhovedet. Derefter slukker controlleren automatisk.*	

Sekvens	
Trin 5: Hygiejnisk behandling	Udfør den hygiejniske behandling af apparatet [se: RENGØRING, DESINFEKTION OG STERILISATION, side 24].

6 FEJLAFHJÆLPNING

Henvend dig hos producenten eller forhandleren:

– ved fejl, der ikke er anført i dette kapitel.

– hvis den foreslåede fremgangsmåde ikke afhjælper fejlen.

Fejl	Mulige årsager	Afhjælpning
Apparatet kan ikke tændes.	Batterierne er opbrugt.	Sæt nye batterier i, eller tilslut netdelen.
	Netdelen er ikke sat rigtigt i stikkontakten, eller USB-stikket sidder ikke korrekt i controllerens USB-tilslutning.	Kontroller, at netdelen sidder korrekt i stikkontakten USB-stikket i controlleren.
Apparatet forstøver ikke eller er uventet ophørt med at forstøve.	Der er ikke påfyldt medikament.	Påfyld et egnet medikament.
	Inhalationen blev afbrudt.	Tryk på tænd/sluk-knappen for at fortsætte inhalationen.
	Den maksimale driftstid pr. anvendelse på 20 minutter er nået.	
Forstøvningen varer længere end normalt.	Aerosolapparatet er tilstoppet.	Udfør plejemodus.
Nogle områder på controllerens hus kan nå temperaturer på op til 42 °C.	Apparatet bruges tæt på den øvre grænseværdi for omgivelsestemperaturen ved 40 °C.	Skift håndens position, hvis det føles ubehageligt ved berøring. Udfør terapien med en lavere omgivelsestemperatur.
Ved udførelsen af plejemodus er rengøringsvæsken ikke løbet helt igennem.	Apparatet har slået fra automatisk efter 20 min., selvom væsken endnu ikke er løbet helt igennem.	Tænd controlleren igen med tænd/sluk-knappen. Derpå skylles den resterende væske igennem.

Kun PARI GmbH's tekniske service eller et servicecenter, der udtrykkeligt er autoriseret hertil af PARI GmbH, må reparere apparatet. Hvis andre personer åbner eller manipulerer apparatet, bortfalder alle garantikrav. I disse tilfælde påtager PARI GmbH sig intet ansvar.

7 TEKNISKE DATA

7.1 El-tilslutning

Effektforbrug	< 2,0 W
Indgangsspænding	5 V DC
Tilslutningstype	USB-C

Brug med batterier

Batterier	3 × 1,5 V (mignon AA LR6/alkaline)

7.2 Krav til en netdel

Udgangsspænding	5 V DC
Udgangsstrøm	> 1 A
Tilslutningstype	USB-C
Normativ kontrol	IEC 62368-1, IEC 60601-1, IEC 60950-1 oder IEC 60335-1

7.3 Mål/vægt/påfyldningsvolumen

Vægt for det samlede apparat inkl. mundstykke (inkl. batterier)	104 g

Controller

Mål [B × H × D]	53,5 mm × 99 mm × 46,5 mm
Vægt (uden batterier)	73 g

Forstøverhoved (inkl. mundstykke)

Mål [B × H × D]	47,5 mm × 60 mm × 112 mm
Vægt (inkl. mundstykke)	31 g
Maks. påfyldningsvolumen	8 ml

7.4 Aerosolkarakteristika iht. ISO 27427

De angivne aerosolkarakteristika i denne brugsanvisning er fremkommet iht. ISO 27427 med en påfyldningsvolumen på 2,5 ml salbutamol. Hvis der anvendes andre opløsninger eller suspensioner til forstøvningen, kan aerosolkarakteristikaene afvige fra de angivne (specielt, hvis disse udviser en højere viskositet).

	Middelværdi
MMAD [µm][5] (median masserelateret aerodynamisk diameter)	4,4
GSD[5] (geometrisk standardafvigelse)	1,82
Respirabel fraktion [% < 5 µm][5]	58,1
Aerosolandel [% < 2 µm][5]	8,2
Aerosolandel [% > 2 µm < 5 µm][5]	49,9
Aerosolandel [% > 5 µm][5]	41,9
Aerosol output [ml][6]	0,80
Aerosol outputrate [ml/min][6]	0,21
Restvolumen [ml] (gravimetrisk bestemt)	0,41
Outputrate med henblik på påfyldningsvolumen [%/min][6]	8,4

7.5 Klassifikation iht. IEC 60601-1 / EN 60601-1

Beskyttelsestype mod elektrisk stød (netdel)	Beskyttelsesklasse II
Beskyttelsesgrad mod elektrisk stød fra anvendelsesdelen (forstøver)	Type BF
Beskyttelsesgrad i henhold til EN 60529 mod indtrængning af faste fremmedlegemer og vanddråber	IP 22
Beskyttelsesgrad ved anvendelse i nærheden af brændbare blandinger af anæstetika med luft, ilt eller lattergas	Ingen beskyttelse
Driftstype	Konstant drift

5) Måling med Next Generation Pharmaceutical Impactor (NGI) ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed. Inspiratorisk flow: 15 l/min.

6) Måling med åndedrætssimulator ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed. Indåndingsvolumen 500 ml, åndedrætsfrekvens 15 cykler/minut, sinusformet åndedrætsmønster, indåndings-/udåndingsforhold 1:1 (hos voksne; kan variere hos børn).

7.6 Elektromagnetisk kompatibilitet

Medicinsk elektrisk udstyr er mht. elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) underlagt særlige forholdsregler. Det må kun installeres og tages i anvendelse iht. EMC-anvisningerne.

Bærbart og mobilt højfrekvens-kommunikationsudstyr kan påvirke medicinsk elektrisk udstyr. Anvendelse af andet tilbehør, andre omformere og ledninger end de angivne, med undtagelse af de omformere og ledninger, som producenten af det medicinske elektriske udstyr sælger som reservedele til interne komponenter, kan medføre øget emission eller en reduceret støjbestandighed på apparatet.

Apparatet må ikke stilles lige ved siden af eller stables sammen med andre apparater. Hvis der kræves drift i nærheden af eller stablet med andre apparater, skal det medicinske elektriske apparat overvåges for at sikre korrekt drift i den benyttede anbringelse.

Tekniske data om den elektromagnetiske kompatibilitet (EMC-oplysninger) i tabelform fås ved henvendelse til producenten eller forhandleren eller på internettet [se: Links, side 36]

7.7 Omgivelsesbetingelser

I brug

Omgivelsestemperatur	+5 °C til +40 °C
Relativ luftfugtighed	15 % til 90 % (ikke kondenserende)
Atmosfærisk tryk	700 hPa til 1060 hPa

Driften af apparatet i professionelle indretninger inden for sundhedsplejen er begrænset til stationære sengeafdelinger og til intensivafdelingen. Driften af apparatet i områder med forøget magnetisk eller elektrisk stråling (f.eks. i nærheden af en MR-scanner) er ikke tilladt.

Transport og opbevaring mellem anvendelserne

Omgivelsestemperatur	-25 °C til +70 °C
Relativ luftfugtighed	0 % til 90 % (ikke kondenserende)
Atmosfærisk tryk	500 hPa til 1060 hPa

8 ANDET

8.1 Bortskaffelse

Dette produkt er omfattet af reglerne i 2002/96/EF (WEEE)[7]. Dette produkt må derfor ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. De respektive nationale bestemmelser for bortskaffelsen skal følges (f.eks. bortskaffelse via kommunen eller forhandleren). Materialegenbrug medvirker til at mindske forbruget af råstoffer og skåne miljøet.

8.2 Links

Garantibetingelser:
https://www.pari.com/int/warranty-conditions

Tekniske data vedr. elektromagnetisk kompatibilitet:
https://www.pari.com/fileadmin/Electromagnetic-compatibility-2.pdf

PARI-inhalationssystemer om bord på fly:
https://www.pari.com/fileadmin/041D0625_Airplane_Certificate_Jet_nebuliser.pdf

7) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS direktiv 2012/19/EU af 04. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

155D0007-B da 2026-07-23



PARI GmbH, Spezialisten für effektive Inhalation
Moosstr. 3, 82319 Starnberg, GERMANY
info@pari.de

©2026 PARI GmbH Spezialisten für effektive Inhalation